

아보카도 전용 프로그램(프린터) 설치 가이드



아보카도 전용프로그램은
데이터 보안을 위해 **VPN(Virtual Private Network)**을
사용하여 전용회선의 암호화된 규격으로 통신하며,
데이터 암호화, 사용자 인증 및 사용자 액세스 권한 제한 등의 기능을 지원합니다.



1) 서비스 신청 완료 페이지

AVOCADO

아보카도 서비스를 신청해 주셔서 감사합니다.

건강한의원의 아보카도 서비스 신청이 완료되었습니다.
아보카도 프린터를 설치하신 후 로그인(bbusisi@gmail.com)해서 사용하세요.

※ 현재 보시는 페이지는 가입 완료시 보이는 임시페이지입니다.
지금 설치하지 않으시더라도 설치파일과 가이드는 먼저 다운로드 받으세요.

1

아보카도 프린터 설치 파일 (exe)
아보카도 프린터를 설치하세요.

아보카도 설치 및 사용 가이드 (PDF)
프린터 설치 방법과 관리자 페이지 사용 안내

다운로드

다운로드

① 아보카도 프린터 설치 파일 다운로드

② 청구시스템이 있는 병원 PC에 설치

③ 설치 완료 후, 바탕화면에 있는 아보카도 아이콘 클릭

④ 로그인창에 이메일 아이디 bbusisi@gmail.com 과 설정한 비밀번호로 로그인

⑤ 청구시스템에서 검진결과지 인쇄지 아보카도 프린터로 인쇄

⑥ 아보카도 프린터로 인쇄한 검진결과지를 아보카도 관리자 페이지에서 확인

⑦ 프린트 설치파일이나, 가이드 문서는 관리자> 이용방법 페이지에서 다운로드 가능

다운로드 버튼을
클릭하여 프로그램을
다운로드 PC에 저장
(건강검진 청구시스템을
사용하는 PC에 설치)

2) 서비스 신청 완료 이메일

AVOCADO

가입완료

{이름}님, 설치하는 우체국 아보카도 회원가입 축하드립니다.

가입정보

병원명	휴먼의원
결제카드	기업은행참조은친구카드
마스터 ID	bbusisi@gmail.com

2

아보카도 프린터 설치 파일 (exe)
아보카도 프린터를 설치 하세요.

아보카도 프린터 설치 가이드 (PDF)
프린터 설치방법을 알아보세요.

다운로드

다운로드

① 아보카도 프린터 설치 파일 다운로드

② 청구시스템이 있는 병원 PC 에 설치

③ 설치 완료 후, 바탕화면에 생성된 아보카도 아이콘 클릭

④ 아보카도 관리자 로그인창에 이메일 아이디 bbusisi@gmail.com 과 설정한 비밀번호 입력 후 로그인

⑤ 청구시스템에서 검진결과지 인쇄시 설치한 아보카도 프린터로 인쇄

⑥ 아보카도 프린터로 인쇄한 검진결과지를 아보카도 관리자 페이지에서 확인


본메일은 발신전용으로 회신이 불가합니다.
궁금하신 점은 회사 홈페이지나 고객센터 cs@fruits5.co.kr 으로 문의주세요

서울시 강남구 봉은사로59길 13 3층 후르츠파워브 | 대표 김경임 | 사업자등록번호 358-19-00764


Fruits5 Company

3

1) 프로그램 다운로드 확인 및 설치

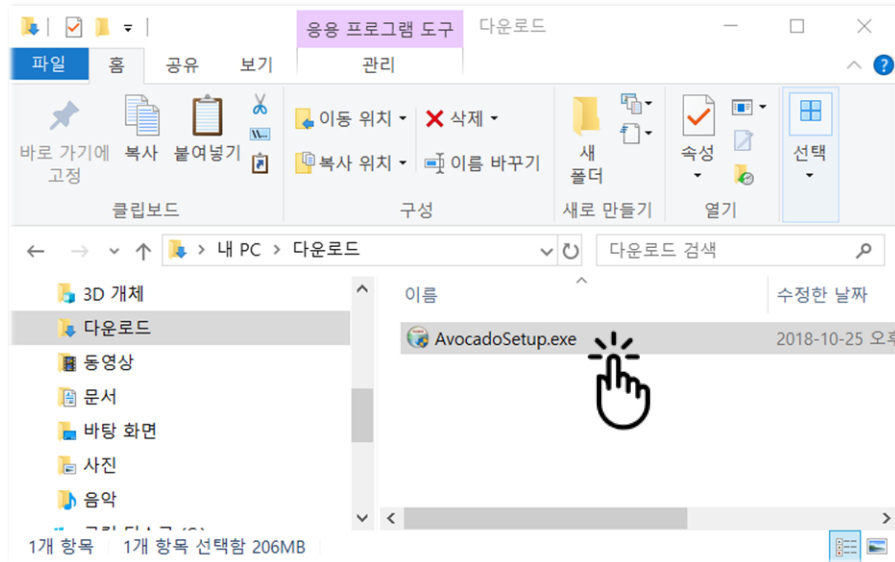

설치 프로그램(AvocadoSetup.exe)을 **더블클릭**하여 설치를 진행

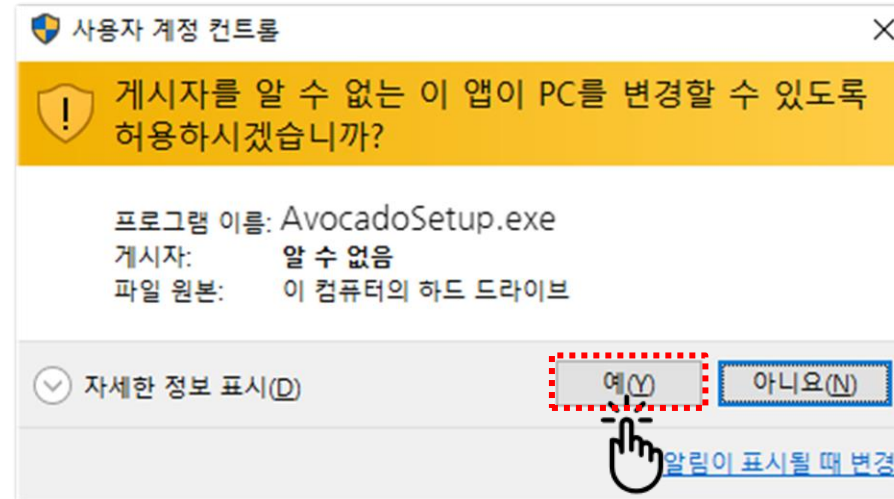


사용자 계정 컨트롤 창이 표시되면 “**예(Y)**”를 클릭하여 프로그램 설치를 진행

2) 프로그램 설치 진행




“다음” 버튼을 클릭하여 설치를 계속 진행

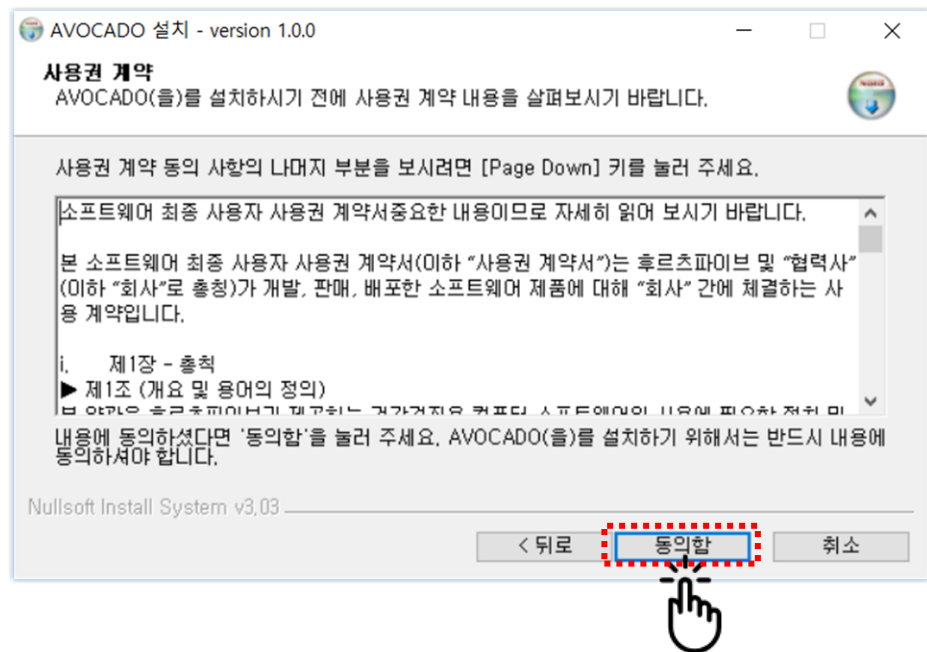


사용권 계약을 숙지하고 “동의함” 버튼을 클릭하여 설치를 계속 진행

2) 프로그램 설치 진행

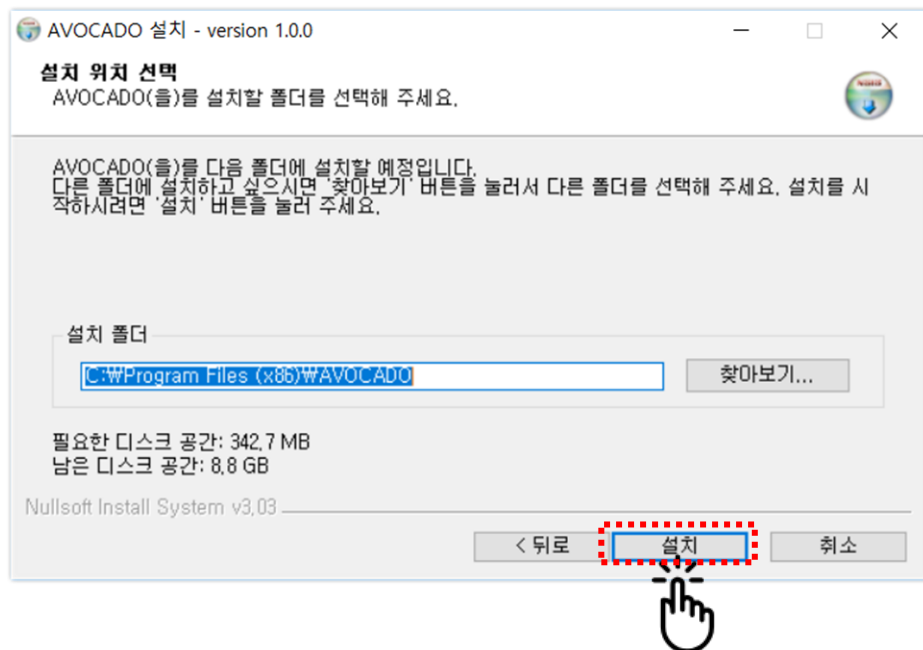


설치 폴더를 확인하고 “다음” 버튼을 클릭하여 설치를 계속 진행

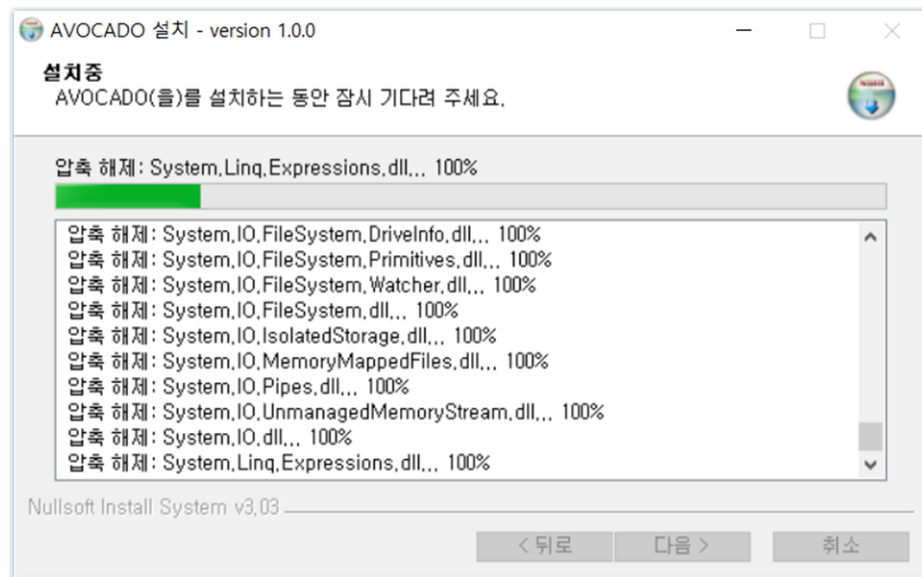

프로그램 압축 해제 및 설치 진행(자동), 100% 완료 될 때 까지 기다림

3) 프로그램 설치 및 완료

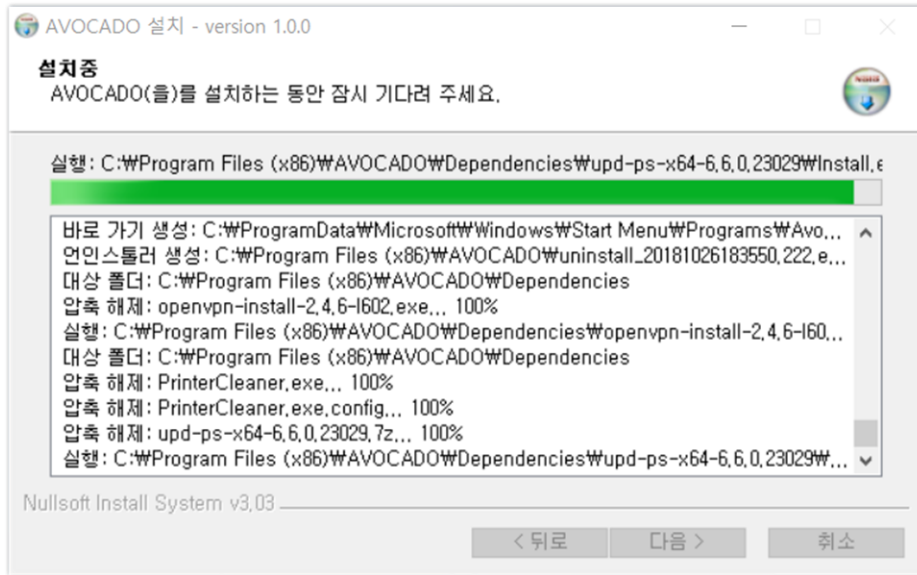


설치 진행중 마지막에 1~2분 정도 설치시간이 더 소요됨,
완료될때 까지 기다림



설치가 100% 완료되면 AVOCADO 설치 완료창이 표시됨
“마침” 버튼을 클릭하면 설치가 완료됨
※ PC 바탕화면에 ‘아보카도 바로가기’ 아이콘이 생성


3) 프로그램 설치 완료 : 아보카도 전용프린터 설치 확인

■ PC가 윈도우 7/8/8.1 일때 프린터 설치 확인 화면

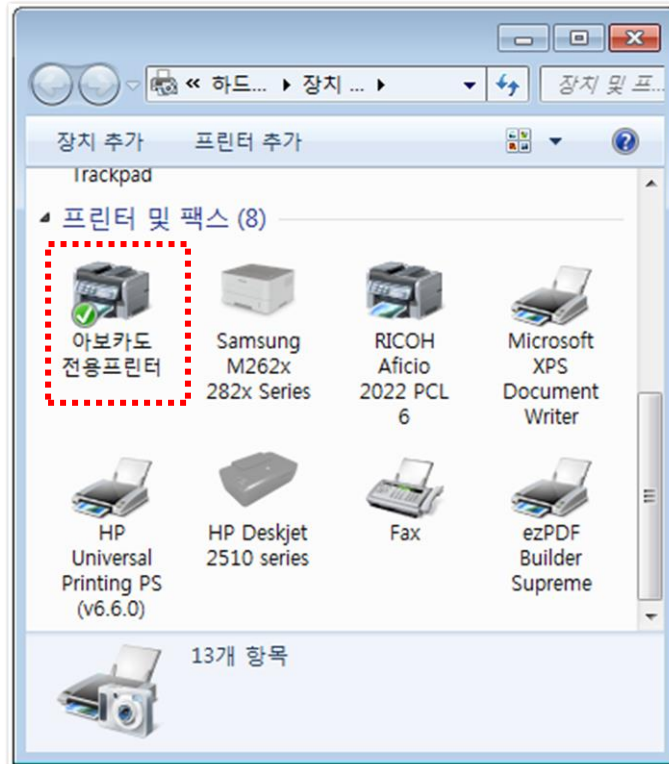

아보카도 프로그램 설치가 완료되면 제어판 > 장치 및 프린터에
'아보카도 전용프린터'가 자동으로 설치 됨

■ PC가 윈도우 10일때 프린터 설치 확인 화면

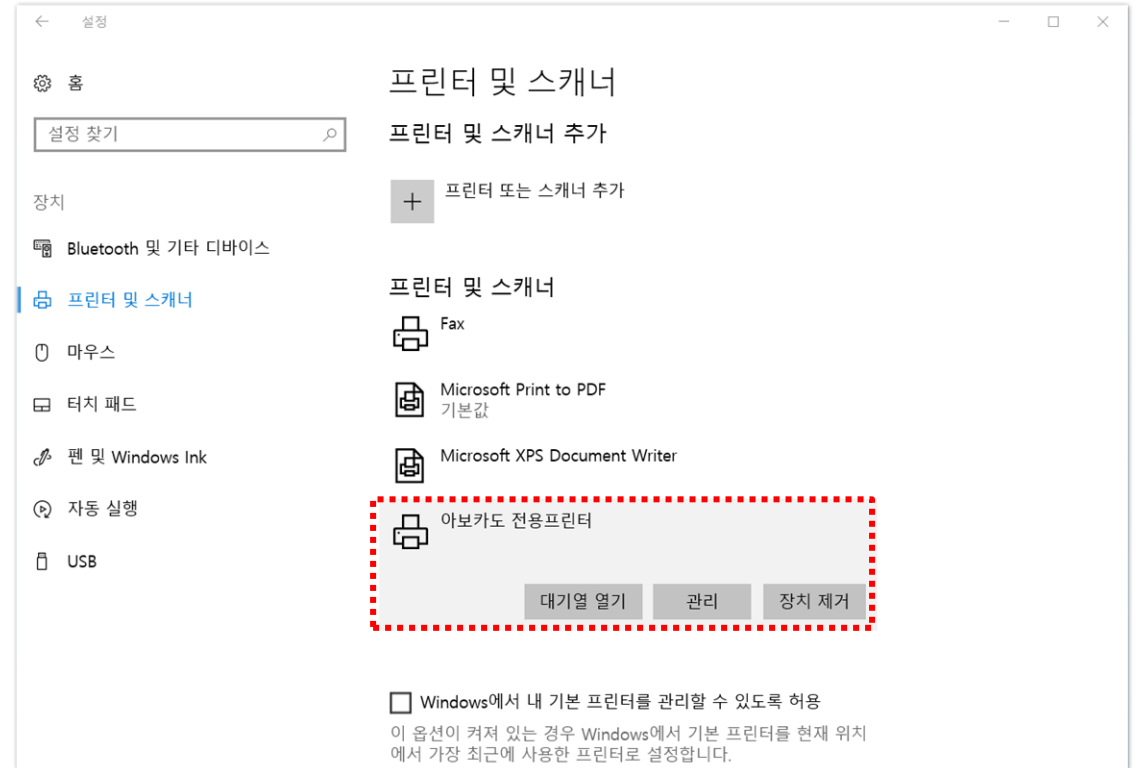


아보카도 프로그램 설치가 완료되면 설정 > 장치 > 프린터 및 스캐너에
'아보카도 전용프린터'가 자동으로 설치 됨

1) 바로가기 아이콘 실행




 PC 바탕화면에 '아보카도 바로가기' 아이콘이 생성, 아이콘을 더블클릭하면 아보카도가 실행됨

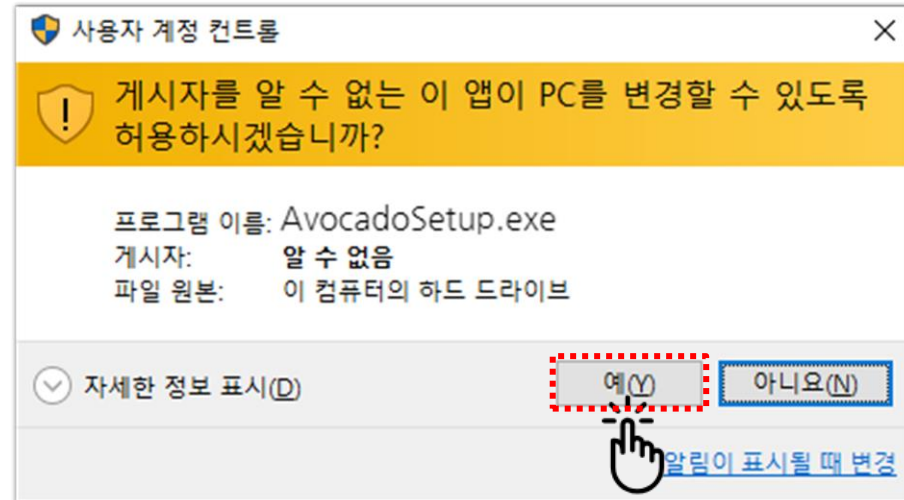

 사용자 계정 컨트롤 창이 표시되면 "예(Y)"를 클릭하여 프로그램을 실행함

2) 프로그램 실행 : 로그인

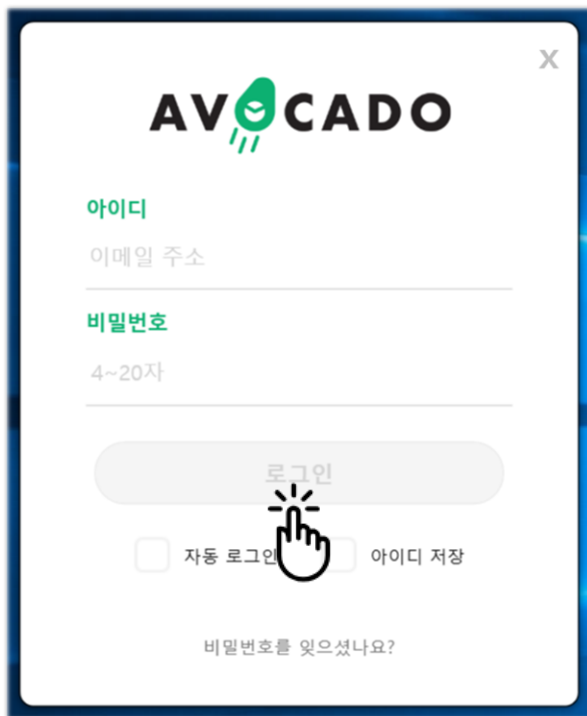

The image shows the AVOCADO login interface. At the top is the AVOCADO logo. Below it are two input fields: '아이디' (ID) with the placeholder '이메일 주소' (Email address) and '비밀번호' (Password) with the placeholder '4~20자' (4~20 characters). Below the fields is a green '로그인' (Login) button. At the bottom are two checkboxes: '자동 로그인' (Auto login) and '아이디 저장' (Save ID). A hand cursor is pointing at the '로그인' button.




회원가입시 설정한 **아이디(이메일주소)**와 **비밀번호**를
입력한후 **로그인** 버튼을 클릭

※ 자동 로그인 및 아이디 저장 기능을 통해 보다 편한 서비스 이용이 가능

여러 이용자가 사용하기를 원할때 아이디 생성은 어떻게?

회원가입때 등록한 아이디는 마스터로 권한이 설정되며, 이후에 다른 이용자 아이디 생성은 마스터 아이디로 로그인후 웹관리자 메뉴의 '초대하기'를 통해 신규 생성함

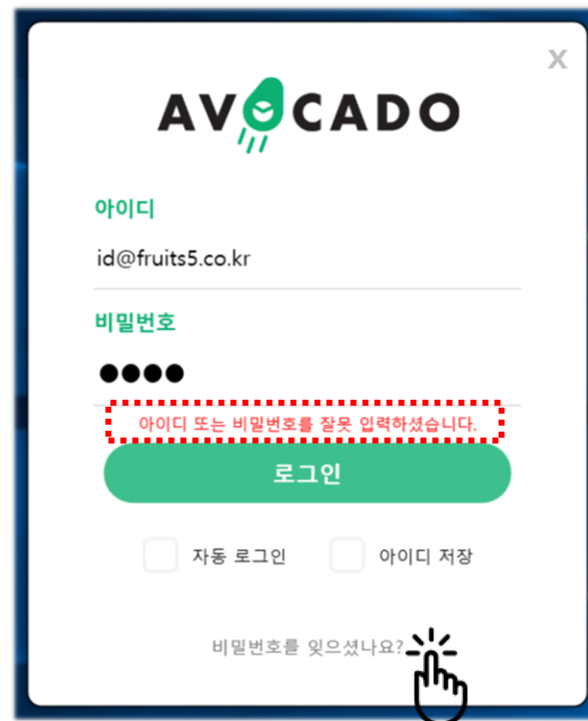

The image shows the AVOCADO login interface with an error message. The '아이디' field contains 'id@fruits5.co.kr' and the '비밀번호' field is masked with dots. A red dashed box highlights the error message: '아이디 또는 비밀번호를 잘못 입력하셨습니다.' (Incorrect ID or password). Below the fields is a green '로그인' (Login) button. At the bottom are two checkboxes: '자동 로그인' (Auto login) and '아이디 저장' (Save ID). A hand cursor is pointing at the link '비밀번호를 잊으셨나요?' (Forgot your password?).



아이디 또는 비밀번호가 틀릴 경우는 오류 메세시 표시

※ 비밀번호가 기억이 안나는 경우 창 하단의 “비밀번호를
잊으셨나요?” 를 클릭

3) 프로그램 실행 : 비밀번호 재설정



등록된 아이디(이메일 주소)를 입력후 **“비밀번호 재설정”**
버튼을 클릭


※ 아이디를 분실하신 경우는 고객센터(1644-4367)로 문의



등록된 아이디(이메일 주소)로 **임시비밀번호가 발송**, 해당
이메일을 확인하여 재로그인 실행

※ 임시비밀번호는 로그인후에 반드시 변경 바랍니다.

3) 프로그램 실행 : 비밀번호 재설정

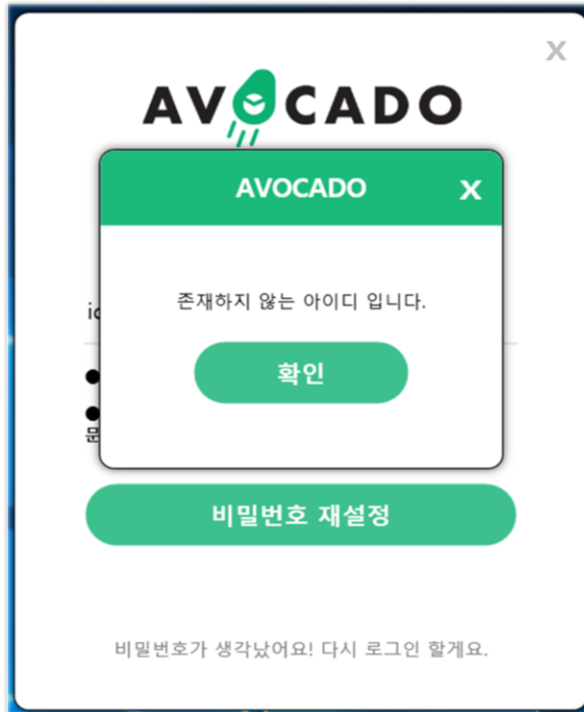

등록된 아이디(이메일 주소)가 없는 경우는 알림창 표시
※ 아이디를 분실하신 경우는 고객센터(1644-4367)로 문의



다시 비밀번호가 생각난 경우 창 하단에 “비밀번호가 생각났어요”를
클릭하면 로그인창으로 다시 이동, 재로그인 실행

4) 로그인 완료 : 웹관리자 서비스

병원 관리자 - AVOCADO

AVOCADO

로그인이 완료되면 PC에 웹관리자창이 자동으로 활성화 됨

대기

Home / 발송 관리 / 확인 필요

현재 이용권 100개 남음

발송 관리

고객 관리

결제 관리

계정 관리

병원 관리

활동 내역

이용 방법

확인 필요발송 대기

서명 없음

잠깐! 검진의 서명이 없습니다. 결과지 인쇄전에 검진의 서명이 미리 등록되어 있어야 합니다.
결과지에 사용될 원내 검진의 분들의 서명을 모두 등록하세요
[검진의 서명 등록 하러 가기](#)

필터설정삭제

	수검자	생년월일	결과지	검진일	인쇄일	발송유형	오류유형
확인 필요한 검진결과지가 없습니다							

→ 웹관리자 서비스의 자세한 설명은 별도의 서비스 이용가이드를 참고 하세요

5) 로그인 완료 : 트레이(PC 하단 작업표시줄 맨 오른쪽)



1	아보카도 홈	아보카도 홈페이지 빠른 새창 활성화 기능
2	병원 관리자	웹관리자 서비스 빠른 활성화 기능
3	로그인/로그아웃	로그인 일때 → 로그아웃 기능 또는 로그아웃 일때 → 로그인 기능
4	프린터 상태	프린터 상태 (정상) : 프린터(녹색)가 정상일때 표시 프린터 상태 (점검필요) : 프린터(빨간색) 설정에 이상이 있을때 표시 프린터 상태 (설치필요) : 프린터(빨간색)가 설치되지 않았을때 표시
5	종료	아보카도 서비스(웹관리자 페이지/트레이) 종료
6	도움말	웹관리자 서비스의 도움말 활성화 기능
7	설정	윈도우 시작시 자동 실행, 업데이트 알림 받기, 바로가기 만들기 기능

※ 아보카도 트레이 아이콘 상태표시 종류

-  아보카도 서비스의 로그인이 **정상적** 일때 표시
-  아보카도 서비스가 **로그아웃 일때** 표시 → 재로그인 필요
-  아보카도 서비스 **접속이 끊어졌거나 불안정할때** 표시

※ 만약, 아보카도 트레이 아이콘이 안보이시면?



작업 표시줄에 ‘^’를 클릭하시면
아보카도 트레이 아이콘이 보입니다
(마우스로 아이콘을 끌어다 작업 표시줄에 넣으시면 클릭없이
바로 보실 수 있어요)

■ 서비스 이용 순서

아보카도 서비스는 데이터 보안을 위한 **VPN(암호화된 전용 네트워크) 작동이후** 결과지 발송이 정상 지원됩니다.


① 아보카도 로그인

- 데이터 보안네트워크 작동
- 웹관리자 서비스 이용 권한




② 검진프로그램 출력

- 검진결과통보서 출력(인쇄) - 우편
- 통보 대상자 핸드폰 입력 or 인쇄 - 모바일 등기 우편
- 통보 대상자 이메일 입력 or 인쇄 - 이메일

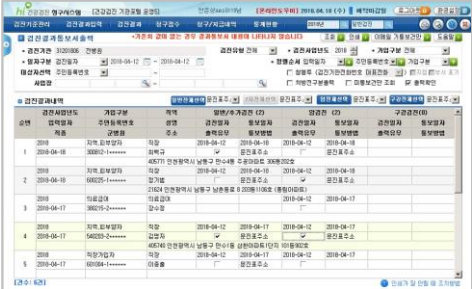

③ 아보카도 병원관리자 서비스

- 발송관리, 고객관리, 결제관리, 계정관리
- 병원관리, 활동내역 등

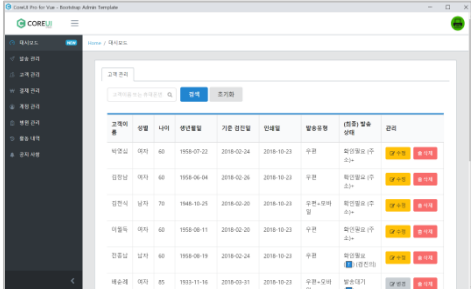

! 아보카도 보안네트워크 VPN(Virtual Private Network) 소개

VPN(Virtual Private Network)은 암호화된 규격의 인터넷 네트워크를 이용하여 특정 그룹만 사용 가능한 네트워크를 만드는 가상 사설망 기술입니다. 인증과 암호화, 터널링을 통하여 VPN 서버와 장치간의 암호화된 연결을 형성하여 데이터가 이동하는 동안 데이터를 암호화함으로써 해커가 중간에 데이터 패킷을 가로채고 수정하는 것을 방지함으로써 보안 및 개인정보를 보호합니다.

아보카도 VPN은 openssl 라이브러리 및 SSLv3/TLSv1 프로토콜과 다른 기술을 함께 사용하여 강력하고 안정적인 VPN 솔루션을 제공 합니다.

05. 우편 및 모바일 등기 우편 발송 관리 : 병원관리자 서비스

건강검진프로그램에서 출력(인쇄)를 완료하시면, 웹관리자 서비스의 ‘발송관리’ 메뉴에서 수검자 확인이 가능합니다.(익일 자동발송)

병원 관리자 - AVOCADO

AVOCADO

Home / 발송 관리 / 발송 대기

발송 관리

고객 관리

결제 관리

계정 관리

병원 관리

활동 내역

이용 방법

[신.홍산부인과의원]

대기

현재 이용권 10개 남음

확인 필요

발송 대기

발송 정보

현재 3건의 결과지가 내일 발송될 예정입니다.

발송대기 결과지들은 다음날(주말/공휴일과 겹칠 경우 다음 주 제1회 평일) 발송됩니다.

※ 외국인의 경우 공단등록정보와 본인인증정보의 불일치로 모바일 발송이 불가합니다.

※ 고령층의 모바일 결과지 확인에 어려움이 있어 60세 이상은 우편 발송으로 기본 설정됩니다. [설정 변경]

건강검진프로그램에서 정상적으로 출력(인쇄)가 완료되면 웹관리자 서비스의 발송관리 > 발송대기 페이지에 발송 대상 수검자 리스트가 표시 됩니다

(대기상태에서 다음날 오전에 우편자동화 시스템으로 발송)

10세

70세 이상

삭제

☐	수검자	생년월일	결과지	검진일	인쇄일	발송유형	관리
☐	루크 (남)	1964-06-16 (55세)	일반, 생활습관	2019-02-12 (화)	2019-02-12 (화) 오전 12:11	우편	발송 유형
☐	레아 (여)	1976-03-02 (43세)	일반, 자궁경부암, 유방암	2019-02-12 (화)	2019-02-12 (화) 오전 12:11	등기	발송 유형
☐	아나킨 (남)	1934-12-09 (85세)	일반, 대장암, 위암, 간암상반기	2019-02-12 (화)	2019-02-12 (화) 오전 12:11	우편	발송 유형

1 - 3 (총 3개)

→ 웹관리자 서비스의 자세한 설명은 별도의 서비스 이용가이드를 참고 하세요

아보카도 프린터 설치/로그인/결과발송 에 대한 내용이었습니다.

추가로 웹관리자 서비스의 자세한 설명은 별도의 **서비스 이용가이드**를 참고 하세요.